

14 mars 2019

URGENT – AVIS DE SÉCURITÉ CONCERNANT UN DISPOSITIF MÉDICAL

Type d'action	Rappel
Référence Teleflex	EIF-000353
Nom commercial	Filtre HME Gibeck + raccord annelé Raccord annelé RUSCH Raccords RUSCH multiples pour circuits respiratoires Raccords RUSCH pour circuits respiratoires
Référence produit/Numéro de lot	Voir l'annexe 4

Cher client,

Informations détaillées sur les produits concernés

Teleflex a mis en œuvre une mesure corrective de sécurité volontaire pour les produits susmentionnés. Veuillez vous reporter à l'annexe 4 pour la liste des références produit et lots concernés.

Description du problème et mesures immédiates requises

Teleflex Medical met en œuvre une mesure corrective de sécurité pour les produits susmentionnés, car il est possible que les raccords double rotule et Cobb se détachent en cours d'utilisation. Si le détachement se produit avant utilisation, il devrait être rapidement identifié par l'utilisateur durant la préparation. Si le détachement se produit en cours d'utilisation et se manifeste sous la forme d'une fuite dans le circuit respiratoire, les alarmes de pression du ventilateur seront émises. Il pourrait alors être nécessaire d'intervenir pour remplacer le raccord par un autre raccord annelé ou reconnecter le circuit respiratoire directement sur la sonde endotrachéale jusqu'à ce qu'un autre raccord annelé neuf soit disponible. En cas de report du remplacement du raccord annelé ou de la reconnexion du circuit respiratoire, la fuite peut conduire à une désaturation jusqu'à ce que le raccord annelé soit remplacé et la ventilation normale maintenue.

Nos dossiers indiquent que vous avez reçu un produit concerné par cette mesure corrective de sécurité. Nous demandons maintenant à nos clients de prendre les mesures suivantes.

Remarque importante : veuillez suivre la mesure appropriée en fonction de votre cas de figure :

Localisation du dispositif	Numéro de la liste de mesures
Domicile	1
Structures médicales (hôpitaux, cliniques, etc.)	2
Distributeurs	3

Liste de mesures numéro 1

Domicile

1. Nous vous demandons de vérifier votre stock de produits concernés par cette mesure corrective. Veuillez vous reporter à l'annexe 4 pour la liste des codes et lots concernés. Les utilisateurs doivent **cesser d'utiliser** les produits concernés et les mettre immédiatement en quarantaine. Pour obtenir de l'aide, contactez votre représentant du service qualité.
2. Si le produit répertorié à l'annexe 4 est déjà utilisé, Teleflex recommande de remplacer le raccord annelé. Veuillez vous reporter à l'annexe 3 pour la liste des codes de produit de substitution de Teleflex.
3. Si vous n'avez pas de stock de produits mentionnés à l'annexe 4, veuillez cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire d'accusé de réception (annexe 1) et retourner ce formulaire au numéro de fax ou à l'adresse e-mail mentionné(e) ci-après.
4. Si vous avez un stock de produits mentionnés à l'annexe 4, veuillez cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire d'accusé de réception (annexe 1) et compléter les informations sur tous les produits en votre possession ou sous votre contrôle. Retournez ce formulaire au numéro de fax ou à l'adresse email mentionné(e). Nous vous contacterons afin de vous communiquer un numéro d'autorisation de retour et d'organiser la reprise des produits concernés.
5. Teleflex (ou votre revendeur local) vous dédommagera dès réception et contrôle des produits concernés retournés.
6. **Pour obtenir des informations complémentaires ou de l'aide concernant l'approvisionnement du produit de substitution, veuillez contacter votre représentant du service clientèle.**

Liste de mesures numéro 2

Structures médicales

1. Nous vous demandons de vérifier votre stock de produits concernés par cette mesure corrective. Les utilisateurs doivent cesser d'utiliser et de distribuer les produits concernés et les mettre immédiatement en quarantaine. Les structures médicales ont deux options :
 - a. vous pouvez renvoyer tous les produits concernés à Teleflex (reportez-vous à l'annexe 4 pour la liste des codes de produit et lots concernés),
 - b. ou vous pouvez inspecter et renvoyer uniquement les produits défectueux. Reportez-vous à l'annexe 2 pour les instructions d'inspection détaillées.
2. Si le produit concerné est *in situ*, Teleflex recommande de remplacer le raccord annelé. Veuillez vous reporter à l'annexe 3 pour la liste des codes de produit de substitution de Teleflex.
3. Si vous n'avez pas de stock de produits concernés par cette mesure corrective, veuillez cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire d'accusé de réception (annexe 1) et retourner ce formulaire au numéro de fax ou à l'adresse e-mail mentionné(e) ci-après.
4. Si vous avez un stock de produits mentionnés à l'annexe 4, veuillez cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire d'accusé de réception (annexe 1) et compléter les informations sur tous les produits en votre possession ou sous votre contrôle. Retournez ce formulaire au numéro de fax ou à l'adresse email mentionné(e). Nous vous contacterons afin de vous communiquer un numéro d'autorisation de retour et d'organiser la reprise des produits concernés.
5. Teleflex (ou votre revendeur local) vous dédommagera dès réception et contrôle des produits concernés retournés.

Liste de mesures numéro 3

Distributeurs

1. Transmettez cet avis de sécurité à tous vos clients qui ont reçu des produits concernés par cette mesure corrective. Votre client sera ensuite tenu de compléter le formulaire d'accusé de réception et de vous le retourner.
2. Veuillez vous reporter à l'annexe 3 pour la liste des codes de produit de substitution de Teleflex. Contactez le service clientèle de Teleflex si vous avez besoin d'aide à ce sujet.
3. Nous vous demandons de vérifier votre stock de produits concernés par cette mesure corrective. Les utilisateurs doivent cesser d'utiliser et de distribuer les produits concernés et les mettre immédiatement en quarantaine. Les distributeurs ont deux options :
 - a. vous pouvez renvoyer tous les produits concernés à Teleflex (reportez-vous à l'annexe 4 pour la liste des codes de produit et lots concernés),
 - b. ou vous pouvez inspecter et renvoyer uniquement les produits défectueux. Reportez-vous à l'annexe 2 pour les instructions d'inspection détaillées.
4. En tant que distributeur, vous êtes tenu de confirmer à Teleflex que vous avez pris en compte la mesure corrective de sécurité décrite ci-dessus. Après avoir pris toutes les mesures requises, veuillez transférer le formulaire d'accusé de réception dûment rempli au Service Qualité.
5. Veuillez noter que toutes les autorités compétentes concernées des États membres de l'espace économique européen/de la Suisse (EEE/CH) et de la Turquie seront informées par Teleflex dans les cas où Teleflex a directement distribué les produits concernés.
6. Si vous avez continué à distribuer ces produits en dehors de votre pays, veuillez le signaler à Teleflex en envoyant un e-mail à l'adresse e-mail ci-dessous.
7. Si vous êtes un distributeur et/ou que vous devez rendre des comptes dans ou en dehors de la zone EEE/CH/TK, veuillez informer votre autorité compétente de cette action. Veuillez transférer à Teleflex la notification et toutes les communications avec votre autorité locale compétente.

Teleflex

Teleflex informe tous ses clients, les employés de Teleflex et ses distributeurs de cette mesure corrective de sécurité.

Transmission de cet avis de sécurité concernant un dispositif médical

Cet avis doit être transmis à toutes les personnes de votre organisation devant être informées et à toutes les organisations ayant reçu les dispositifs potentiellement concernés. Veuillez transmettre cet avis aux utilisateurs finaux, aux médecins, aux responsables de la gestion des risques, aux centres logistiques/de distribution, etc. Maintenez la diffusion de cet avis jusqu'à ce que les mesures requises aient été prises dans votre organisation.

Contact

Pour obtenir des informations supplémentaires ou de l'aide sur ce problème, veuillez contacter :

Service Qualité :

Contact : Carine Fournier

FAX : 05 62 18 79 82

Téléphone : 05 62 18 79 41

E-mail : productcomplaints.france@teleflex.com

Veuillez noter que toutes les autorités compétentes concernées des États membres de l'espace économique européen/de la Suisse (EEE/CH) et de la Turquie seront informées par Teleflex dans les cas où Teleflex a directement distribué les produits concernés. Teleflex s'est engagée à fournir des produits de qualité, inoffensifs et efficaces. Nous regrettons sincèrement toutes les perturbations occasionnées. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à contacter votre représentant local ou le Service Qualité.

Au nom de Teleflex,

Padraig Hegarty

Padraig Hegarty

VP, Global QA (Manufacturing)

**CONSIGNES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE CORRECTIVE DE SÉCURITÉ
FORMULAIRE D'ACCUSÉ DE RÉCEPTION**

AVIS À PRENDRE EN COMPTE IMMÉDIATEMENT

Réf. EIF-000353

VEUILLEZ IMMÉDIATEMENT RENVOYER LE FORMULAIRE REMPLI À :

FAX : 05 62 18 79 82

E-mail : productcomplaints.france@teleflex.com

<input type="checkbox"/> Nous accusons réception de cet avis de sécurité et nous confirmons que nous avons pris les mesures nécessaires, spécifiées dans cet avis. Nous confirmons que notre stock ne comporte AUCUN produit concerné par cette mesure corrective de sécurité.	<input type="checkbox"/> Nous accusons réception de cet avis de sécurité et nous confirmons que nous avons pris les mesures nécessaires, spécifiées dans cet avis. Nous confirmons que notre stock COMPORTE des produits concernés par cette mesure corrective de sécurité. L'utilisation et la distribution des produits concernés ont été interrompues. Tous les produits concernés ont été suspendus et le nombre de produits mentionné ci-dessous sera retourné. N° d'autorisation de retour _____
---	---

VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT LES QUANTITÉS.

RÉFÉRENCE PRODUIT	NUMÉRO DE LOT	QUANTITÉ (retournée)
<ul style="list-style-type: none"> • Veuillez joindre une copie du formulaire d'accusé de réception dûment complété dans le colis de retour contenant les unités à retourner • Assurez-vous que le numéro NAR soit clairement visible sur le colis de retour. • Veuillez étiqueter les produits retournés avec la mention « Retours suite à une mesure corrective de sécurité » 		

Veillez compléter ce formulaire d'accusé de réception et le retourner immédiatement au numéro de fax ou à l'adresse e-mail susmentionné(e).

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT (EX. NOM DE L'HÔPITAL, DE L'ORGANISME DE SOINS DE SANTÉ)	
ADRESSE DE L'ÉTABLISSEMENT	Téléphone/Email
FORMULAIRE COMPLÉTÉ PAR :	Cachet
NOM EN MAJUSCULES : _____	
SIGNATURE : _____	
DATE	

INSTRUCTIONS D'INSPECTION

Applicables uniquement aux structures médicales et aux distributeurs

Le produit concerné par cette mesure corrective de sécurité comporte des numéros d'identification (ID) gravés sur le raccord double rotule Cobb. Bien que Teleflex n'ait pas pu restreindre la portée de cette mesure en fonction des numéros de lot, le produit peut être distingué comme étant conforme ou non conforme grâce au numéro d'ID. Il s'agit d'une étape d'inspection facultative uniquement destinée aux structures médicales et aux distributeurs. Si vous souhaitez nous retourner tous les codes et lots concernés sans procéder à cette inspection, vous êtes libres de le faire.

Instructions :

1. Si le produit est toujours dans son emballage (c'est-à-dire qu'il n'est pas *in situ*), il peut être nécessaire de le manipuler à l'intérieur de l'emballage de sorte que le numéro d'ID soit clairement visible. Reportez-vous aux figures 1 et 2 ci-dessous pour l'emplacement du numéro d'ID.
2. Les produits doivent être visuellement inspectés pour identifier l'ID gravé sur le produit.
3. Si le numéro d'ID sur le produit est répertorié dans le tableau 1 ci-dessous, le produit est potentiellement non conforme et doit être retourné à Teleflex.
4. Si le numéro d'ID n'est pas répertorié dans le tableau 1 ci-dessous, ces unités sont conformes et vous pouvez les conserver pour utilisation/distribution.

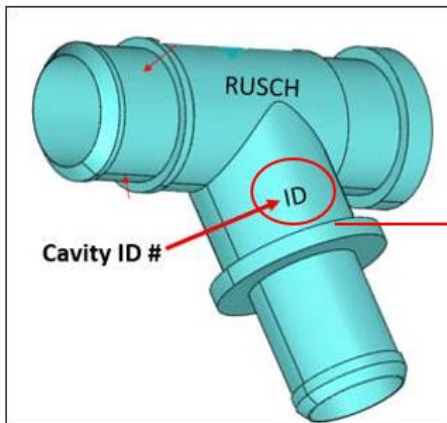


Figure 1 – Raccord double rotule Cobb



Figure 2 – Numéro d'identification

(ID)

Numéros d'ID	
Produit non conforme	Si le numéro d'ID gravé sur le raccord annelé est 39, 42, 45 ou 48 – À renvoyer à Teleflex
39	
42	
45	
48	

Tableau 1

Codes de produit Teleflex de substitution et commentaires				
Code de produit concerné par la mesure corrective	Substitution 1	Substitution 2	Substitution 1 - Commentaire	Substitution 2 - Commentaire
191010-000150	22512	22532	Raccord annelé, intérieur lisse et connecteur double rotule. Propre	Raccord annelé, intérieur extensible et connecteur double rotule. Propre
191010-T00150	22512	22532	Raccord annelé, intérieur lisse et connecteur double rotule. Propre	Raccord annelé, intérieur extensible et connecteur double rotule. Propre
191011-000100	22511	22531	Raccord annelé, intérieur lisse et connecteur double rotule. Stérile	Raccord annelé, intérieur extensible et connecteur double rotule. Stérile
191011-000150	22511	22531	Raccord annelé, intérieur lisse et connecteur double rotule. Stérile	Raccord annelé, intérieur extensible et connecteur double rotule. Stérile
191014-000100	22512	22532	Raccord annelé, intérieur lisse et connecteur double rotule. Propre	Raccord annelé, intérieur extensible et connecteur double rotule. Propre
191014-000150	22512	22532	Raccord annelé, intérieur lisse et connecteur double rotule. Propre	Raccord annelé, intérieur extensible et connecteur double rotule. Propre
191014-T00150	22512	22532	Raccord annelé, intérieur lisse et connecteur double rotule. Propre	Raccord annelé, intérieur extensible et connecteur double rotule. Propre
191015-000100	22511	22531	Raccord annelé, intérieur lisse et connecteur double rotule. Stérile	Raccord annelé, intérieur extensible et connecteur double rotule. Stérile
191015-000150	22511	22531	Raccord annelé, intérieur lisse et connecteur double rotule. Stérile	Raccord annelé, intérieur extensible et connecteur double rotule. Stérile
191015-000200	22511	22531	Raccord annelé, intérieur lisse et connecteur double rotule. Stérile	Raccord annelé, intérieur extensible et connecteur double rotule. Stérile
191015-T00150	22511	22531	Raccord annelé, intérieur lisse et connecteur double rotule. Stérile	Raccord annelé, intérieur extensible et connecteur double rotule. Stérile
191036-000000	22532	22531	Raccord annelé, intérieur extensible et connecteur double rotule. Propre	Raccord annelé, intérieur extensible et connecteur double rotule. Stérile
191037-000000	22531	22511	Raccord annelé, intérieur extensible et connecteur double rotule. Stérile	Raccord annelé, intérieur lisse et connecteur double rotule. Stérile
191525-000000	23412	23411	Connecteur avec double rotule et site d'aspiration. Propre	Connecteur avec double rotule et site d'aspiration. Stérile
191526-000000	23411	23412	Connecteur avec double rotule et site d'aspiration. Stérile	Connecteur avec double rotule et site d'aspiration. Propre

Nom de produit	Code de produit	Numéro de lot	Nom de produit	Code de produit	Numéro de lot
Filtre HME Gibeck + raccord annelé	191657 - 000150	201745	Raccord annelé RUSCH	191015 - 000100	18BT13
		201749			18CT03
		201802			18CT12
		201811			18CT19
		201816			18CT27
		201818			18CT32
		201821			18DT04
		201828			18DT29
		201831			18ET21
		201832			18ET36
		201836			18FT03
		201841			18FT07
		201842			18FT30
		201852			18FT40
	191658 - 000100	17KT09			18FT45
		17KT20			18GT07
		17KT24			18GT15
		17LT18			18GT21
		17LT19			18GT30
		18AT29			18HT14
		18DT24			18HT21
		18FT27			18HT26
		18FT42			18HT34
		18FT44			18IT05
		18GT14			18IT24
		18GT28			18JG07
		18HT02			18JG28
		18HT16			18JG29
		18HT20			18JT05
		18IT01			18JT11
		18IT14			18KG06
		18IT19			18KG20
		18IT27			18KG31
		18JT14			18KG32
	18KT02	18KG42			
	18KT10	18KT06			
	18LT12	18LG10			
	18LT17	18LG20			
	19AT01	18LG32			
	19AT03	18LG35			
	191658 - 000150	17KT08			18LG36
		17KT15			18LT21
		17LT07			19AG06
17LT11		191015 - 000150			
17LT21			201826		
18DT24			17KT03		
18FT37			17KT10		
18GT24			17KT17		
18KT02			17KT25		
18KT24			17LT05		
18LT08	17LT12				
18LT26	17LT22				
17LT31	17LT31				
191659 - 000150	17LT10	18AT05			
	18BT04	18AT10			
	18FT36	18AT11			
	18IT07	18AT18			
191771 - 518150	201820	18AT27			
	201822	18BG09			
	201825	18BT02			
	201826	18BT07			
	201828	18BT13			
	201836	18BT20			
	201837	18CT03			
	201841	18CT12			
	201901	18CT19			
	201902	18CT27			
	201821	18CT32			
191010 - 000100	201821	18CT32			
	191010 - 000150	201745	18DT13		
		201748	18DT14		
Raccord annelé RUSCH	191010 - 000100	201821			
	191010 - 000150	201745			
		201748			

Nom de produit	Code de produit	Numéro de lot	Nom de produit	Code de produit	Numéro de lot
Raccord annelé RUSCH	191010 - 000150	201802	Raccord annelé RUSCH	191015 - 000150	18DT17
		201805			18DT21
		201806			18DT29
		201808			18DT30
		201809			18ET04
		201811			18ET14
		201812			18ET21
		201816			18ET27
		201828			18ET36
		201831			18FT03
		201832			18FT19
		201837			18FT23
		201839			18FT25
		201842			18FT30
		201844			18FT40
		201846			18FT45
	191010 - 000200	201803			18FT49
	191010 - T00150	201805			18GT15
		201810			18GT21
		201842			18GT30
	191011 - 000050	17KT10			18HT06
		17KT17			18HT14
		17KT25			18HT21
		17LT05			18HT26
		17LT12			18HT34
		17LT22			18IT05
		18AT18			18IT11
		18BT07			18IT17
		18BT20			18IT24
		18CT03			18JG28
		18DT13			18JT05
		18DT29			18JT11
		18ET37			18KG06
		18FT25			18KG12
		18GT07			18KG20
		18GT15			18KG31
		18GT21			18KG32
		18HT06			18KG42
		18HT14			18LG20
		18HT21			18LG32
		18IT05			18LG36
		18IT17			19AG06
		18LG32			19AG16
191011 - 000100	17KT10	17KT03			
	17KT17	17KT10			
	17KT25	17KT17			
	17LT05	17KT25			
	17LT12	17LT05			
	17LT22	17LT12			
	17LT31	17LT38			
	18AT11	18AT11			
	18AT18	18AT18			
	18AT18	18AT27			
	18BG09	18BG09			
	18BT07	18BT02			
	18BT13	18BT07			
	18CT12	18CT27			
	18CT19	18DT13			
	18CT32	18DT21			
	18DT04	18DT29			
	18DT13	18ET04			
	18DT29	18ET14			
	18ET21	18ET21			
	18ET36	18ET27			
	18FT19	18ET36			
	18FT25	18FT03			
18FT45	18FT30				
18GT04	18FT40				
18GT07	18FT49				

Nom de produit	Code de produit	Numéro de lot	Nom de produit	Code de produit	Numéro de lot	
Raccord annelé RUSCH	191011 - 000100	18GT15	Raccord annelé RUSCH	191015 - 000200	18GT04	
		18GT21			18HT26	
		18GT30			18HT34	
		18HT06			18IT11	
		18HT14			18IT17	
		18HT21			18JG29	
		18HT26			18KG06	
		18HT34			18KG12	
		18IT05			19AG16	
		18IT17			19AG28	
		18IT24			191015 - T00150	17KT10
		18JG28				17KT17
		18JG29				17LT12
		18JT05				18AT18
		18JT11				18BT07
		18KG06				18DT13
		18KG12				18FT25
		18KG20				18FT45
		18KG42				18HT21
		18LG10		18HT34		
		18LG35		18IT11		
		18LG36		18IT24		
		18LT21		18KG31		
		19AG06		18KG32		
		19AG16		18LG10		
		191011 - 000150		17KT03	18LG20	
				17KT10	18LG35	
				17KT17	19AG06	
				17KT25	19AG16	
				17LT05	19AT06	
				17LT12	191033 - 000000	17KT03
				17LT22		17KT10
				18AT05		17KT25
				18AT27		17LT05
				18BG09		17LT22
				18BT02		17LT31
				18BT07		17LT38
18BT13	18AT05					
18CT12	18BT02					
18CT19	18BT07					
18CT27	18BT13					
18CT32	18BT20					
18DT13	18CT03					
18ET04	18CT12					
18ET14	18CT19					
18ET36	18CT27					
18ET37	18ET14					
18FT19	18ET21					
18FT25	18ET36					
18FT30	18FT19					
18FT45	18FT30					
18GT04	18FT40					
18GT07	18FT45					
18GT15	18GT04					
18GT21	18GT07					
18GT28	18GT15					
18GT30	18GT21					
18HT06	18GT30					
18HT14	18HT06					
18HT21	18HT14					
18HT26	18HT21					
18HT34	18HT26					
18IT05	18IT05					
18IT17	18IT24					
18IT24	18JG28					
18JG28	18JT05					
18JG29	18KG12					
18JT05	18LG20					
18JT11	18LG36					
	19AG06					

Nom de produit	Code de produit	Numéro de lot	Nom de produit	Code de produit	Numéro de lot
Raccord annelé RUSCH	191011 - 000150	18KG06	Raccord annelé RUSCH	191034 - 000000	201744
		18KG12			201750
		18KG31			201751
		18KG32			201803
		18LG10			201805
		18LG32			201808
		18LG36			201819
	19AG06	201820			
	191011 - 000200	17KT03			201822
		17KT17			201825
		17LT05		201826	
		17LT12		201828	
		18AT11		201829	
		18AT18		201832	
		18AT27		201839	
		18BT07		201840	
		18CT12		201842	
		18CT19		201844	
		18DT04		201846	
		18DT13		191036 - 000000	201744
		18DT29			201745
		18ET37			201750
		18FT03			201751
		18FT07			201752
		18FT19			201801
	18GT07	201806			
	18GT15	201807			
	18GT21	201808			
	18JG29	201809			
	18JT05	201810			
	18KG06	201812			
	18KG12	201817			
	18KG31	201818			
18LG10	201819				
191011 - 000300	17KT25	201820			
	17LT22	201821			
	18AT05	201822			
	18AT27	201823			
	18BG09	201826			
	18DT14	201827			
	18DT17	201828			
	18FT07	201829			
	18HT14	201830			
	18IT17	201831			
	18IT24	201832			
	18JG28	201834			
	18JT11	201836			
18KG06	201840				
18KG31	201848				
191013 - 000150	18HT26	191037 - 000000	17KT03		
	18JG28		17KT10		
191013 - 000200	18AT27	17KT25			
	18BT13	17LT05			
	18ET04	17LT22			
	18FT03	17LT31			
	18GT04	18BT02			
	18GT07	18BT07			
	18GT30	18BT13			
	18JG28	18CT12			
18JT11	18CT32				
18KG31	18ET21				
191013 - 000250	18BG09	18ET36			
	18CT27	18FT03			
	18FT03	18FT19			
	18GT04	18FT25			
	18HT06	18FT30			
191014 - 000100	201746	18FT45			
	201747	18GT04			
		18GT21			

EIF-000353 - Annexe 4

Nom de produit	Code de produit	Numéro de lot	Nom de produit	Code de produit	Numéro de lot
Raccord annelé RUSCH	191014 - 000100	201748	Raccord annelé RUSCH	191037 - 000000	18HT26
		201750			18IT11
		201806			18IT24
		201807			18JG07
		201808			18JG28
		201810			18JG29
		201816			18JT11
		201820			18KG12
		201822			18KG20
		201825			18KG42
		201828			18LG10
		201834			18LG20
		201836			18LG32
		201839			18LG35
		201841			18LG36
	201843	19AG16			
	201844	191727 - 000150		201744	
	201846			201745	
	201848			201747	
	191014 - 000150			201747	201748
				201748	201749
				201749	201801
				201752	201802
				201801	201803
				201802	201805
				201803	201810
				201804	201811
				201805	201814
				201806	201815
				201810	201816
201811			201818		
201814		201820			
201815		201821			
201816		201822			
201817	201825				
201818	201826				
201819	201827				
201820	201828				
201821	201829				
201822	201830				
201825	201831				
201826	201832				
201827	201834				
201829	201835				
201830	201836				
201831	201838				
201834	201839				
201835	201841				
201836	201842				
201837	201844				
201841	201846				
201842	201848				
201843	201851				
201845	201852				
201846	191727 - 000200	201745			
201847		201747			
201848		201802			
191014 - 000200		201805	201810		
		201745	201811		
		201746	201815		
	201747	201820			
	201802	201821			
	201805	201823			
201806	201826				
201810	201828				
201811	191569 - 000000	201841			
201815		191525 - 000000	201743		
201816			201752		
201817					
201822					

EIF-000353 - Annexe 4

Nom de produit	Code de produit	Numéro de lot	Nom de produit	Code de produit	Numéro de lot	
Raccord annelé RUSCH	191014 - 000200	201823	Raccords RUSCH pour circuits respiratoires	191525 - 000000	201815	
		201825			201816	
		201828			201818	
		201847			201819	
		201848			201820	
		201849			201821	
		201850			201823	
		201852			201826	
	201902	201827				
	191014 - T00150	201745			201828	
		201746			201833	
		201747			201840	
		201748			201844	
		201749			191526 - 000000	
		201801				17KT17
		201811				17LT05
		201815				17LT12
		201825				17LT22
		201826		17LT38		
		201827		18AT05		
		201828		18AT11		
		201829		18BT02		
		201830		18CT12		
		201831		18DT29		
		201834		18ET04		
		201836		18ET21		
		201837		18ET27		
	201840	18FT30				
	201847	18FT49				
	201851	18GT15				
	201852	18GT21				
	191015 - 000050	18HT06		18GT30		
		18HT34		18HT14		
		18IT11		18JG29		
	191015 - 000100	17KT10		18JT11		
		17KT17		18KG12		
		17KT25		18KG20		
		17LT12		18KG31		
		17LT22		18KG32		
		17LT31		18LG10		
		18AT12		18LG20		
		18AT18		19AG16		
		18AT27		191527 - 000000		
		18BG09			201745	
18BT02		201746				
18BT07		201747				
		201751				
	201752					