

Avis de sécurité urgent

Objet : Lève-personnes plafonniers et mobiles Liko®—Étrier standard SlingBar™ 450

N° d'identification FSCA : Mod 486

Type d'action : Modification d'un appareil

Date :

À l'attention de : directeur général, administrateur de l'établissement, ingénieur de l'établissement, directeur de la vigilance ingénierie biomédicale, officier de liaison des dispositifs médicaux

Dispositifs concernés : Étrier standard SlingBar™ 450, numéros de produit : 20090029, 20190024, 20190041, 31190015, 31290017, 31290043, 3156001, 3156003, 3156007, 3156014, 3156016, 31590043 ou 5019013 **distribué entre janvier 1980 et novembre 2012**


Ces numéros de produit peuvent être associés aux lève-personnes séries Golvo 1000, 3000 et 7000, Viking M, Viking L, LikoLight 100 et 125, Caroli 101, et Uno 100, 101 et 102.

Contexte :

Hill-Rom s'est aperçu d'un problème de sécurité en lien avec l'étrier standard SlingBar™ 450, qui pourrait concerner divers lève-personnes plafonniers et mobiles Liko. Trébucher ou tomber sur l'étrier, généralement lorsque le lève-personnes est stationné ou rangé parce qu'il n'est pas utilisé, risque d'entraîner une blessure grave. Cela peut concerner un patient, un membre du personnel soignant ou toute personne présente. Le crochet à l'extrémité de l'étrier risque de transpercer une partie du corps : tête, épaule, aine, par exemple.

Cinq blessures graves ont été causées par une telle chute ou un tel trébuchement sur un étrier. Il y a eu un cas de blessure grave alors qu'un individu montait sur ou jouait avec le lève-personne. Aucun dysfonctionnement de l'appareil n'est associé à ces incidents.

Hill-Rom a développé une protection pour étriers pour atténuer ces risques (voir illustration page suivante).

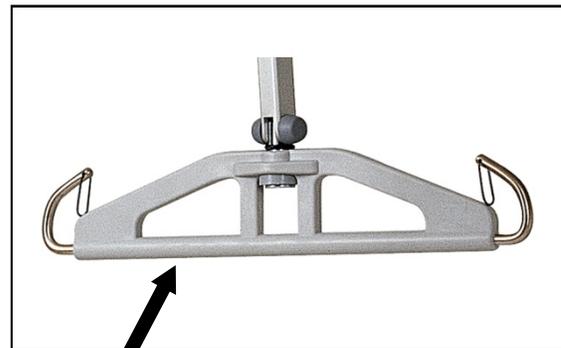

Ce modèle d'étrier SEULEMENT est concerné.



L'étrier universel n'est PAS concerné.

Mesure à prendre par l'utilisateur :

Vous trouverez dans cette notification un **formulaire de réponse**. Veuillez déterminer le nombre de protections pour étrières dont vous avez besoin, puis **remplissez et renvoyez le formulaire à Hill-Rom au plus vite**, et nous vous enverrons gratuitement le nombre de protections correspondant.

Conservez les mêmes pratiques de soulèvement et ne permettez à aucune personne non autorisée, particulièrement les enfants, de jouer autour du lève-personne ou de l'utiliser.

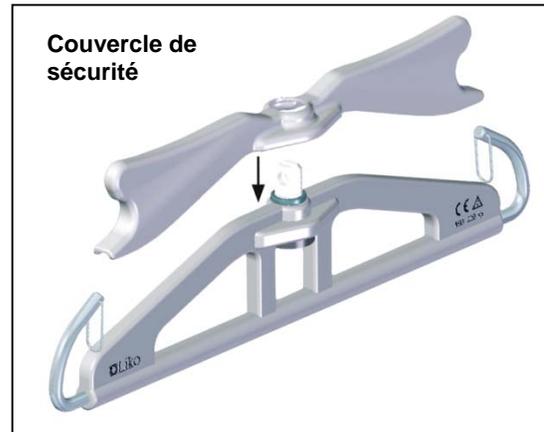


Illustration du couvercle de sécurité

Diffusion du présent avis de sécurité :

Veuillez transmettre une copie du présent avis à tous les employés concernés de l'établissement.

Veuillez contrôler l'application de cet avis et de ses mesures de sécurité aussi longtemps que nécessaire pour garantir l'efficacité des mesures correctives préconisées.

Hill-Rom confirme que les autorités compétentes ont été informées de cette mesure corrective en matière de sécurité.

Personne-ressource :

Pour toute question concernant cette notification relative à la sécurité des clients, veuillez contacter le service d'assistance technique de Hill-Rom :

Cordialement,

Service d'assistance technique Hill-Rom

Annexes : Formulaire de réponse

Formulaire de réponse

**Objet : Lève-personnes plafonniers et mobiles Liko® - Étrier
standard SlingBar™ 450(Mod 486)**

Veillez remplir le formulaire ci-dessous avec les bonnes informations et renvoyer ce formulaire de réponse dans les meilleurs délais au service d'assistance technique de Hill-Rom. Consultez les instructions spécifiques en bas de page. Merci.

Numéro de compte Liko : _____

Nom de l'établissement : _____

Adresse de l'établissement : _____

Ville : _____ État : _____ Code postal : _____

Nom du contact de l'établissement : _____

Veillez écrire lisiblement

Signature : _____

Titre : _____ Date : ____/____/____ Téléphone : _____

Fax : _____

Cochez la mesure prise :

- Nos produits ne sont pas concernés.
- Nous avons besoin de _____ protections afin d'équiper tous les étriers concernés dans notre établissement.

**Dans les plus brefs délais, merci d'envoyer ce formulaire
par FAX ou email à :**