

Paris, le 02 mars 2006

Objet : Alerte sur les potences murales porte-sérum

commercialisées par la société « Carboxyque Santé » entre 1992 et 1998

Madame, Monsieur,

Un accident grave nous conduit à vous informer d'un risque lors de l'utilisation de certaines références de potences murales porte-sérum. Il s'agit d'un risque de rupture d'une des pièces de l'axe d'articulation, ayant pour conséquence d'entraîner la chute de la potence. Ce défaut potentiel concerne les potences murales vendues entre 1992 et 1998 sous les références 120 RAL 103 et 120 RAL 105 par la société Carboxyque Santé (absorbée en 1998 par Air Liquide Santé France).

Ces équipements n'étaient pas assujettis à l'époque de leur mise sur le marché aux obligations des dispositifs médicaux, de ce fait ils ne possèdent ni numéros de série, ni numéro de lot.

Vous trouverez en annexe une série de photographies vous permettant d'identifier les modèles concernés et le défaut potentiel. Le défaut est décelable par un jeu trop important entre l'axe et le bras, ainsi qu'une rotation de la partie supérieure du support de l'axe.

En accord avec l'AFSSAPS nous vous recommandons de vérifier le bon état de ces équipements, et en particulier la partie articulée des bras porte-sérum.

Soucieux de votre sécurité et de celle de vos patients, nous nous tenons à votre disposition pour vous apporter tout complément d'information que vous souhaiteriez.

Veillez agréer, Madame, Monsieur l'expression de nos salutations distinguées.

Jean-Pierre Renard
Directeur Qualité d'Air Liquide Santé France



Photo N°1

Potences simple bras RAL 103 et double bras RAL 105

Les potences concernées sont facilement identifiables par leur système de fixation ne possédant pas d'axe traversant.

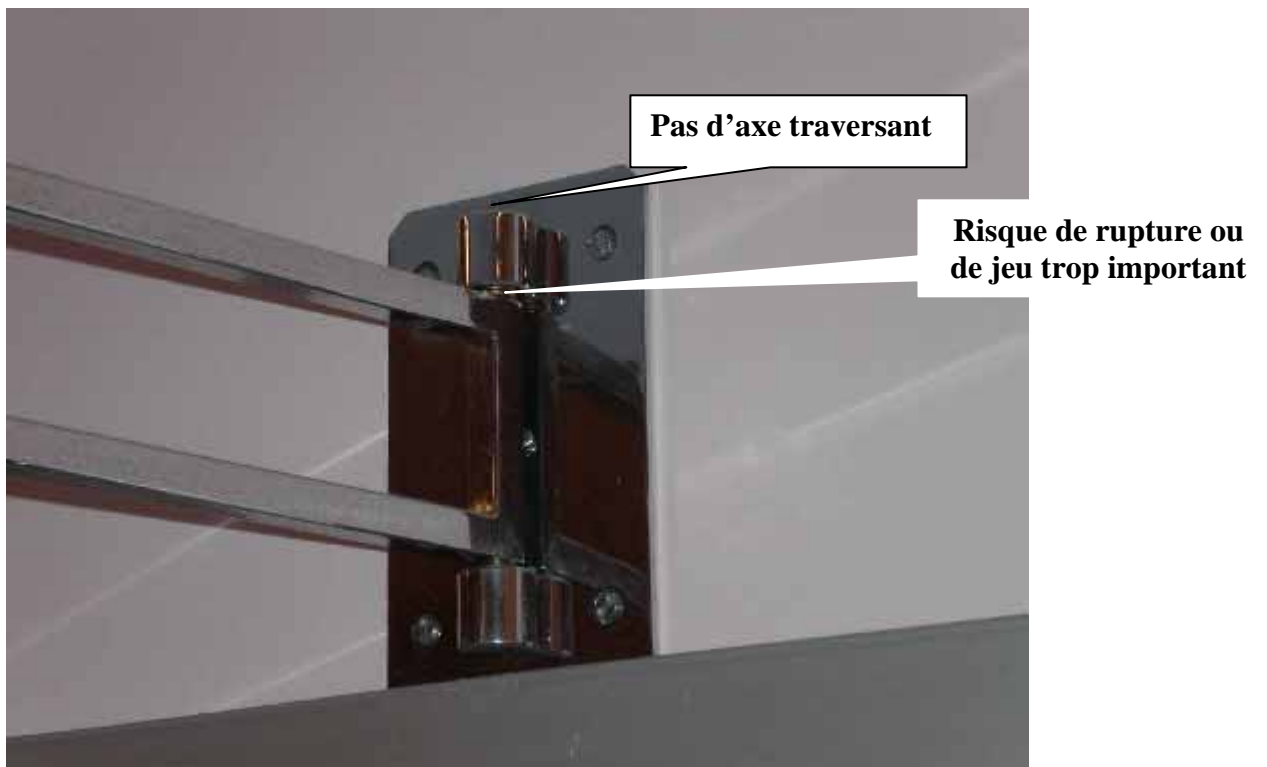


Photo N°2

Platine support de bras