

# Comment utiliser l'auto-injecteur EpiPen® (adrénaline)

EpiPen® est utilisé pour le traitement d'urgence des réactions allergiques sévères.



**Tube de rangement**

**Pointe orange** = sortie de l'aiguille.

! Ne jamais poser votre pouce, les doigts ou la main sur cette pointe

**Capuchon de sécurité bleu.**

! Ne pas enlever ce capuchon avant d'être prêt à l'injection


- Retirez l'auto-injecteur de son tube de rangement.
- Vérifiez l'aspect de la solution contenue dans l'auto-injecteur qui doit rester limpide et incolore. Si la solution est colorée ou contient des particules, il faut remplacer l'auto-injecteur\*.
- Suivez les trois étapes suivantes :



! Tenir l'auto-injecteur par le centre, jamais aux extrémités

• Tenez fermement le corps de l'auto-injecteur ; la pointe orange (côté aiguille) vers le bas.

• **Enlevez le capuchon de sécurité bleu, juste avant l'injection.**

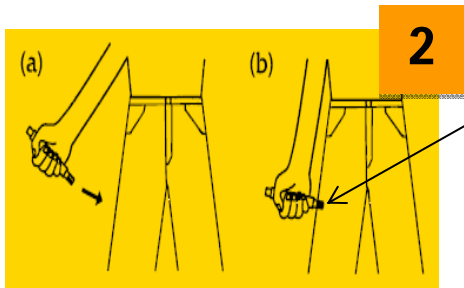

**Pointe orange**

= sortie de l'aiguille

! Injecter uniquement dans la face extérieure de la cuisse

• Orientez la pointe orange vers la face extérieure de la cuisse (à environ 10 cm).

**En position perpendiculaire à la cuisse, enfoncez fermement la pointe orange dans la cuisse jusqu'à ce que vous entendiez un « déclic ».**

**Il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton pour administrer le produit.**

L'administration peut être effectuée à travers un vêtement.



**Pointe orange** = sortie de l'aiguille

• **Maintenez l'auto-injecteur sur la cuisse pendant 10 secondes.**

Retirez l'auto-injecteur, puis massez l'endroit de l'injection.

• **L'injection est terminée;** la fenêtre d'observation située sur le corps de l'auto-injecteur apparaît foncée.

## Protection intégrée contre l'aiguille



Avant injection



Après injection

• Après l'injection, la pointe orange s'étend pour couvrir l'aiguille d'injection qui n'est donc plus visible.

• L'auto-injecteur peut être replacé en toute sécurité dans son tube de rangement mais celui-ci ne pourra plus se fermer.

• Rapportez à l'hôpital ou à la pharmacie le stylo usagé pour une élimination adéquate.

**Après l'injection, une prise en charge médicale immédiate est nécessaire. Composez le 15 si vous vous trouvez en France ou rendez vous dans un service médical d'urgence.**

\***ATTENTION** : défaut ponctuel d'étiquetage sur la boîte et le corps de l'auto-injecteur d'EPIPEN : la phrase « Remplacer si la solution est décolorée » est erronée.